


Logiciel Tobii Communicator 5

Pour quels types de handicap ?

Tobii Communicator est un logiciel dédié aux personnes dépourvues de la parole, cherchant un logiciel pour communiquer/parler/s'exprimer/échanger avec leur entourage et l'extérieur via de la voix enregistrée ou de la voix de synthèse.

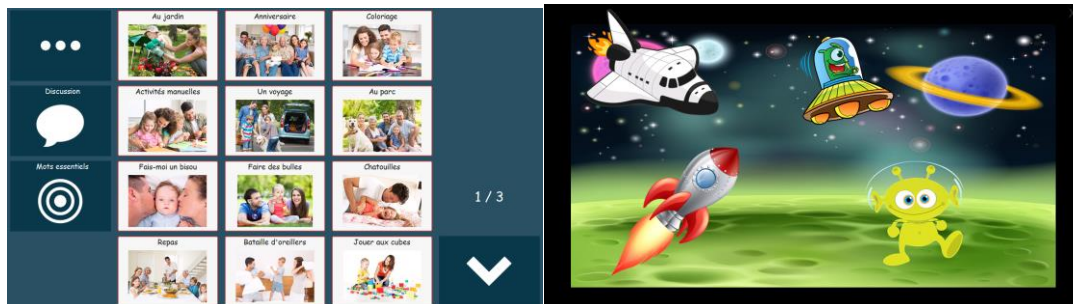

Tobii Communicator est aussi un générateur d'applications : Contrôle d'environnement, Navigation internet et Windows, email, sms, téléphonie, multimédia en fonction du matériel sur lequel est installé le logiciel (voir tableau de synthèse page suivante).



Tobii Communicator peut être installé sur différentes plateformes en fonction des besoins et des capacités de l'utilisateur et aussi avoir différents moyens d'accès opérationnels (voir tableau page suivante) :

- I serie (Tobii Communicator 5 inclus dans ce matériel)
- PC sous windows ou tablette sous windows (7 – 8 pro – 8.1 - 10)

Tobii Communicator est fourni avec un numéro de licence permettant l'installation sur 3 postes différents et donc de faire un travail de programmation et d'utilisation sur 3 terminaux différents.

Tobii Communicator est donc particulièrement destiné aux personnes :

- Ayant des troubles d'élocution avec ou sans trouble de langage associé et avec ou sans trouble moteur associé.
- Cherchant une personnalisation d'accessibilité aux fonctions informatiques, de contrôle d'environnement et d'usage de la téléphonie GSM

Tobii Communicator : Caractéristiques fonctionnelles



	PC ou Tablette sous Windows	I series (fourni avec Tobii Communicator)
Accessibilité		
Ecran tactile	Depend écran	✓
Contacteur	(adaptateur nécessaire)	✓
Souris USB	✓	✓
Joystick fauteuil	✓ *	✓ *
Commande oculaire	Avec PC eye Mini Eye mobile pour tablette	✓ (version commande oculaire intégrée)
Clavier personnalisable	✓	✓
Fonctionnalité		
Communication écrite	✓	✓
Prédiction de mots	✓	✓
Phrases en mémoires	✓	✓
Communication pictographique	✓	✓
Sur une page	✓	✓
Avec arborescence	✓	✓
Visionneuse photo	✓	✓
Lecture vidéo	✓	✓
Lecteur Musique	✓	✓
Contrôle de Windows	✓	✓
Email	✓	✓
Internet	✓	✓
Contrôle d'environnement		✓
SMS		✓
Téléphonie par voix de synthèse et/ou microphone intégré		✓

*Selon compatibilité du fauteuil

Caractéristiques

- **Simple et intuitif à programmer** : en sélectionnant des applications déjà existantes, en ayant la possibilité de les modifier, d'en créer ou d'en télécharger sur le site de partage (PageSetCentral.com)
- **Programme Evolutif** : des grilles de communication simples avec quelques cases pour une introduction à la communication, jusqu'à des systèmes par arborescences complets pour une communication fonctionnelle
- **Un outil multifonctionnel et polyvalent**
- **Site de partage des grilles en ligne (gratuit)**
Version d'essai complète pour une durée de 30 jours avec possibilité de sauvegarde du travail effectué et verrouillage intermittent par la suite.

Synthèse d'utilisation de Tobii Communicator /Matériel

	Avantages	Limites
PC sous windows	<ul style="list-style-type: none"> Prix 	<ul style="list-style-type: none"> Si Poste fixe (problème pour l'usage à la communication) Sur PC Portable faible : <ul style="list-style-type: none"> Puissance sonore Autonomie Robustesse Moyen d'accès limité Pas de téléphonie ni de contrôle d'environnement Problème Installation sur Fauteuil
Tobii Eye Mobile avec tablette 	<ul style="list-style-type: none"> Commande oculaire Transfert facile de la commande oculaire depuis la tablette vers un PC. (double emploi) 	<ul style="list-style-type: none"> Faible puissance sonore Faible autonomie (<3 heures) Moins robuste que Iserie Non conçu pour un usage extérieur
I series 	<ul style="list-style-type: none"> Robuste Tout en un : facile et ergonomique pour l'aidant Appel GSM SMS Contrôle d'environnement Autonomie de 9heures et plus Contrôle oculaire possible GARANTIE 3 ou 5 ans CASSES INCLUSES* 	<ul style="list-style-type: none"> Investissement

*Casse d'écran, de coque, de connecteur, chargeur prises en charge à raison d'une fois par an pendant la durée de garantie (garantie initiale = 3 ans, extension possible à 5 ans).

Accompagnement

Par la société Proteor avec son réseau de prestataires qualifiés :

- Expert depuis plus de 32 ans
- Formation spécifique
- Installation/mise en service
- Devis gratuit
- Maintenance spécifique
- Assistance technique Proteor Premium disponible

Références

Référence	Désignation
7 E27	Logiciel Tobii communicator 5 (3 activations)
7BJ11	USB Interface 2 contacteurs
7N2003	Interface USB/contacteur Swifty
706201ATPCO	Assistance technique Proteor Premium 2 ans, 3 ans ou 5 ans.

Contacts et renseignements

Proteor aides électroniques



aides.electroniques@proteor.com

03 80 78 42 20

[Formulaire de demande d'évaluation](#) sur notre site internet dans la rubrique « contactez-nous »

Assistance technique Proteor Premium

Présentez votre numéro client à l'appel ou dans votre mail



support@proteor.com

03 80 78 42 49

[Formulaire de prise en charge SAV](#) sur notre site internet dans la rubrique « SAV »

Et retrouvez toute notre actualité sur :
www.aides.electroniques.proteor.fr