

COMMUNIQUER, DIALOGUER, CONVERSER, DISCUTER, PARLER, REpondre, DIRE, ...

SPRINGBOARD LITE



- Ecran tactile de 17,7cm de diagonale
- Petit, léger, portable
- module Bluetooth intégré
- 500min d'enregistrement vocal
- Logiciel PASS inclus (voir au verso)
- + de 3000 pictogrammes intégrés d'origine
- Port USB et SD intégrés
- Contrôle d'environnement et lecteur MP3 intégrés

SPRINGBOARD LITE. Petit et léger. Portable. Prêt à communiquer! Conçu pour les enfants ou autres utilisateurs d'aides à la communication débutants, le Springboard Lite ne mesure que 18,5cm de côté et pèse seulement 1,1kg! Il dispose d'une poignée intégrée pour un maximum de portabilité. Il est équipé d'un écran tactile et peut aussi être utilisé avec un contacteur, un joystick, un pointeur de tête...

VANTAGE LITE



- Ecran tactile de 21,3cm de diagonale
- Nouveau boîtier, poignée incorporée amovible
- Grilles 4, 8, 15, 45, 60 ou 84 cases disponibles
- Module Bluetooth intégré (fonctions téléphone)
- Port USB et SD intégrés
- Nouvelle voie de synthèse ACAPELA
- Batterie longue durée en option
- Logiciel PASS inclus (voir au verso)
- + de 4500 pictogrammes intégrés d'origine
- Contrôle d'environnement et lecteur MP3 intégrés

VANTAGE LITE possède un tout nouveau boîtier, un nouvel écran tactile de 8,4pouces, une nouvelle grille de 60 cases, ainsi qu'un module Bluetooth pour la connexion sans fil d'un téléphone portable* et le pilotage à distance de l'ordinateur. Il intègre les dernières voix ACAPELA, il contrôle votre environnement et permet d'écouter de la musique (MP3). Il est utilisable via son écran tactile, un contacteur, un joystick, un pointeur de tête,...

VANGUARD



- Large écran LCD tactile de 30,7cm de diagonale
- Port USB et SD intégrés
- Grilles 4, 8, 15, 45, ou 84 cases disponibles
- Logiciel PASS inclus (voir au verso)
- + de 4500 pictogrammes intégrés d'origine
- Contrôle d'environnement et lecteur MP3 intégrés
- Fonctions téléphoniques en option
- Pointeur optique interne en option

VANGUARD est le grand frère de la famille des aides à la communication embarquant le concept **MINSPEAK**. Son **large écran de 30cm** conviendra aux personnes ayant des déficiences visuelles ainsi qu'aux personnes possédant une faible précision gestuelle (guide doigts disponibles). Tout comme **SPRINGBOARD LITE** et **VANTAGE LITE**, **VANGUARD** s'utilise au travers de son écran tactile, un contacteur, un joystick et en option il embarque un Tracker permettant l'utilisation via les mouvements de la tête.

MINSPEAK plus que de la communication, de la conversation ! !

Il existe 3 méthodes de communication (tous possibles avec SPRINGBOARD, VANTAGE et VANGUARD) :

- **par lettre et/ou mots avec ou sans prédiction (voir DIALO sur <http://aides.electroniques.proteor.fr>) :**

L'utilisateur choisit une lettre, un chiffre... Il peut choisir ce qu'il veut exprimer mais au détriment de la rapidité car malgré la prédiction de mots il est nécessaire de construire les mots.

- **par pictogramme à signification unique (voir WINSIL sur <http://aides.electroniques.proteor.fr>) :**

Un pictogramme correspond à un mot, un message. Pour exprimer un vocabulaire riche, il est nécessaire de classer le vocabulaire par pages et la communication perd rapidement en fluidité et en rapidité. De plus il est également difficile de représenter des mots non « producteur d'image ».

- **Par pictogrammes à sens multiples et combinaison de pictogrammes ; MINSPEAK :**


Ce concept étudié par Bruce BAKER linguiste américain montre qu'il est possible de combiner des pictogrammes pour palier aux inconvénients des autres méthodes. Il utilise des pictogrammes à signification multiple (Exemple ; une pomme rouge peut vouloir dire : pomme, rouge, manger,...)

MINSPEAK offre 3 avantages principaux :

- un nombre réduit de pictogrammes pour exprimer beaucoup de mots sans multiplication de pages.
- La place des pictogrammes étant toujours identique, l'utilisateur acquiert des automatismes pour plus de rapidité.
- Ce principe permet d'exprimer des besoins de base et des concepts difficiles à représenter.

MINSPEAK bien plus qu'un concept et un appareil mais aussi un ensemble de services : MINSPEAK est inclus dans les appareils SPRINGBOARD, VANTAGE, VANGUARD

- Page Internet spécifique avec téléchargement gratuit de programmes réalisés par des utilisateurs ou des thérapeutes. Téléchargement possible du logiciel PASS pour tout appareil MINSPEAK.
- présentation et essai sur site ou à domicile.
- Si besoin mise à disposition d'un appareil pour un test en situation.
- Si besoin aide à la programmation spécifique par un conseiller sur site ou à domicile.
- Envoi gratuitement du logiciel PASS d'émulation de chaque appareil sur PC. Ce logiciel permet de se familiariser avec les appareils en attendant d'en disposer. Logiciel fourni également avec les appareils.
- Offre de prix selon les besoins déterminés lors de la visite ou pendant le test.
- Appareil livré avec un ou plusieurs programmes de communication préparés par des spécialistes.
- Formation gratuite pour 2 personnes pendant 2 jours par un conseiller spécialisé et Elisabeth CATAIX-NEGRE experte communication alternative APF sur PARIS. Une formation sur site est possible (nous consulter).
- Fourniture gratuite d'un mini poster représentant les grilles de communication intégrées dans les appareils.

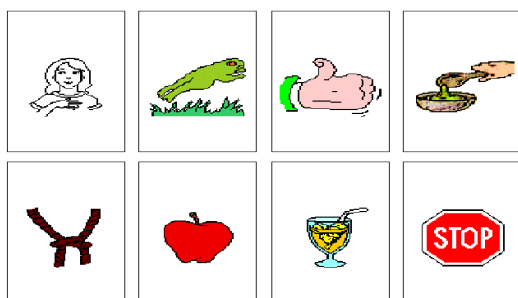

MINSPEAK de la communication la plus simple à la plus sophistiquée