


Tobii I-Series+ : I12-I15

GARANTIE 3 ANS « CASSES INCLUSES* » (extension possible à 5 ans)

Pour quels types de handicap ?

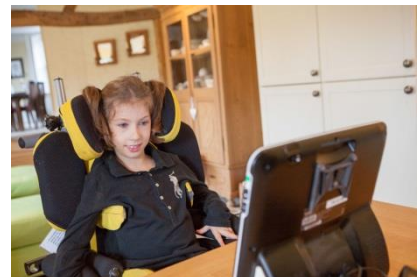

I series + est une tablette PC dédiée aux personnes dépourvues de la parole, cherchant un appareil/une machine pour communiquer/parler/s'exprimer/échanger avec leur entourage et l'extérieur. C'est aussi un excellent duo Accès informatique – contrôle d'environnement embarqué

La gamme **I series +** se décline en version I12 et I15 (pour un écran de 12 pouces de diagonale et 15 dans le deuxième cas).

I series + a été conçu pour un usage sur une table, au lit ou au fauteuil roulant.

I series + permet aussi l'accès adapté à l'usage d'internet, des emails, du multimédia, photos et vidéos, au contrôle d'environnement et à l'envoi et à la réception de SMS, et à la téléphonie.

I series + est fourni avec le logiciel tobii communicator 5.

I series + peut intégrer un module complémentaire pour être piloté par le regard.

I series + répond aux exigences de normes médicales. Son écran « Gorilla glass » est très résistant. Il est classé IP 43 (projection d'eau).

I series + est particulièrement destiné aux personnes :

- IMC même avec une importante athétose via la commande oculaire
- Atteintes de Sclérose Latérale Amyotrophique
- Atteintes de SEP et autres pathologies neurologiques évolutives.
- Tétraplégiques

*Casses d'écran, de coque, de connecteur, de chargeur, ... prises en charge à raison d'une fois par an pendant la durée de garantie (garantie initiale = 3 ans, extension possible à 5 ans).

Pourquoi I-series ?

Accessibilité :

- par clavier (écran tactile paramétrable)
- par contacteur adapté aux capacités motrices (contacteur en option)
- Accès par joystick ou souris adapté aux besoins (souris ou joystick en option)
- Accès par joystick de fauteuil roulant électronique (selon compatibilités)
- Par commande oculaire (oculomètre en option, pouvant être ajouté par la suite mais nécessite un retour usine) avec validation automatique (délai réglable), validation par contacteur (contacteur en option), validation par le clignement des yeux.

Actions :

- Aides à la communication par tableau de lettres, de phonèmes, d'images, de photos,...transcrit en voix de synthèse ou en voix enregistrée
- Envoi de codes infra rouge pour piloter les équipements audio vidéo, la domotique (volets, portes, lumière,...)
- Envoi et réception de SMS et téléphonie (via communication Bluetooth avec votre téléphone portable selon compatibilités)
- Accès à internet, multimédia, email, et environnement Windows

	Tobii Communicator 5 (inclus dans I series +)	Grid 3	Mind Express
Accessibilité			
Ecran tactile	✓	✓	✓
Contacteur	✓	✓	✓
Souris USB	✓	✓	✓
Joystick fauteuil	✓ *	✓ *	✓ *
Commande oculaire	✓	✓	✓
Clavier personnalisable	✓	✓	✓
Fonctionnalité			
Communication écrite	✓	✓	✓
Prédiction de mots	✓	✓	✓
Phrases en mémoires	✓	✓	✓
Communication pictographique	✓	✓	✓
Sur une page	✓	✓	✓
Avec arborescence	✓	✓	✓
Visionneuse photo	✓	✓	✓
Lecture vidéo	✓	✓	✓
Lecteur Musique	✓	✓	✓
Contrôle de Windows	✓	✓	✓
Contrôle d'environnement	✓	✓	✓
Email	✓	✓	✓
Internet	✓	✓	✓
SMS	✓		
Téléphonie par voix de synthèse et/ou micro	✓	Peut nécessiter module complémentaire	

Caractéristiques :

Caractéristiques	Tobii I-Series+ (I12 et I15)
Système d'exploitation	Windows 8.1 et Windows 10
Processeur	Intel® Celeron Quad Core Processor J1900 (2M Cache, 2 Ghz)
RAM	4 GB DDR3
Disque dur	2.5" SSD 120 GB
Lecteur Carte SD	Peut lire jusqu'à 32 Go
Ecran tactile	Capacitif : 12.1", 15.0" format 4/3. Back lit
Taille	I12 : 30.7 x 27.4 x 10.5 / 2.4 cm I15 : 36.9 x 32.6 x 11.2 / 2.5 cm
Poids avec oculomètre : I12/I15	2.8 kg / 3.8 kg
Son	2 x 3 w, grande qualité sonore.
Classe Protection /Résistance aux chutes	IP 43 / 12"> 0.8 m, 15"> 0.5 m (10 fois)
Connectiques	2 USB 2.0, 1 USB 3.0, 2 entrées contacteurs, Ethernet 100/1000 Mbit/s, HDMI, Sortie audio stereo jack 3,5mm. Microphone intégré.
Boutons physiques	5 (Volume +/- & 3 A,B,C programmables) + marche/arrêt
Contrôle d'environnement Infra rouge	GEWA (7 diodes émettrices, 1 diode réceptrice)
GSM	Bluetooth pour transmission de voix et SMS (selon compatibilités téléphones)
Wifi	IEEE802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth® 3.0+HS
Cameras	Arrière 5 MP autofocus Frontale 2MP (pour visio conférence)

- **Autonomie :**
 - 8h en usage continu. Possibilité d'entrer et de sortir l'appareil de la veille par le regard.
 - Possibilité d'avoir des batteries supplémentaires (en option) « interchangeables à chaud »
- **Qualité et Puissance sonore :**
 - Les composants ont été soigneusement choisis pour restituer un son d'une qualité hifi notamment pour un usage en extérieur.
- **Compatibilité logiciel :**
 - **I series +** est fourni avec le logiciel Tobii Communicator 5 intégrant les caractéristiques nécessaires à la communication et à l'usage multifonctionnel.
 - En option, **I series +** peut être utilisé avec d'autres logiciels de communication tels que **The Grid 2**, **Mind express** (d'autres logiciels sont également compatibles, nous consulter) ou si tout simplement un utilisateur possède déjà une licence de ce logiciel, il convient alors de l'installer sur le Iserie.

Accompagnement

Par la société Proteor avec son réseau de prestataires qualifiés :

- *Expert depuis plus de 32 ans*
- *Formation possible*
- *Installation/mise en service possible*
- *Présentation sur place*
- *Devis gratuit*
- *Maintenance spécifique*
- *Possibilité d'explication et d'assistance par téléphone (gratuit)*
- *Possibilité de prise en main à distance de I series + si appareil connecté à internet.*
- *Appareil de prêt en cas de besoin (gratuit sous garantie pendant le traitement de la panne)*

Références

Référence	Désignation
7N25	I12 commande oculaire intégrée et tobii communicator 5 - GARANTIE 3 ANS « casses incluses* »
7N26	I15 commande oculaire intégrée et tobii communicator 5 - GARANTIE 3 ANS « casses incluses* »
7N27	I12 (sans commande oculaire) avec tobii communicator 5 - GARANTIE 3 ANS « casses incluses* »
7N28	I15 (sans commande oculaire) avec tobii communicator 5 - GARANTIE 3 ANS « casses incluses* »
7N25-EXT5	I12 commande oculaire intégrée et tobii communicator 5 - GARANTIE 5 ANS « casses incluses* »
7N26-EXT5	I15 commande oculaire intégrée et tobii communicator 5 - GARANTIE 5 ANS « casses incluses* »
7N27-EXT5	I12 (sans commande oculaire) avec tobii communicator 5 - GARANTIE 5 ANS « casses incluses* »
7N28-EXT5	I15 (sans commande oculaire) avec tobii communicator 5 - GARANTIE 5 ANS « casses incluses* »
7 E21	Logiciel Eye Fx (stimulation sensorielle et cause à effet) (Licence 1 activation)
7 E20	Logiciel Look to Learn (apprentissage de la commande oculaire/ cause à effet/ évaluation) (Licence 1 activation)
7 E26	Extension « Scene & Sound » pour look to learn (Licence 1 activation) 26 activités supplémentaires.
7 E23	Logiciel Tobii Gaze viewer « analyse du regard » (licence 1 activation)
7 E30	Logiciel Grid 3
7N2501	Sacoche pour i12/i15
7N 2502	Batteries pour i12/i15 (lot de 2 par appareils)
7R01	Support roulettes RHD Largeur ajustable (LA)
7R02	Support roulettes RHD Télescopique (TS)/(LA)
7R03	Support roulettes RHD Pliable/(TS)/(LA)
7R04	Support roulettes RHD pliable (TS)/(LA) - Flottant
7R14	Support de table Float RHD avec adapt UDS 2/6kg
ZZDIVA(VMS#)	Bras sur mesure pour tout type de fauteuil roulant

*Casses d'écran, de coque, de connecteur, de chargeur,... prises en charge à raison d'une fois par an pendant la durée de garantie (garantie initiale = 3 ans, achat avec garantie à 5 ans possible).

Contacts et renseignements

Proteor aides électroniques

- Par email : aides.electroniques@proteor.com
- Par téléphone : 03.80.78.42.20
- Site internet : aides.electroniques.proteor.fr

Assistance technique / support client

- Par téléphone : 03.80.78.42.49
- Par email : support@proteor.com